




电热鼓风干燥箱

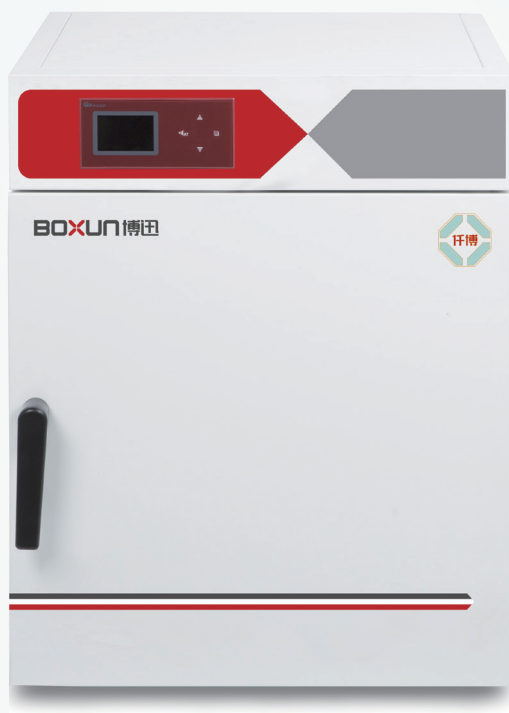

BXH系列

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层
联系电话：021-56980111 传真：021-56303876
公司邮箱：boxun@boxun.com.cn
公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们



电热鼓风干燥箱 >>

BXH系列

应用范围


利用箱体内的热辐射和空气循环对流实现对物品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化、老化、除热源、植物组织杀青。应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究、电气、仪器仪表、电子元器件、高分子材料、塑胶、航空、机械、化工等领域。

产品特点

- 采用BRIGHT I智能操作系统，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态
- 背光触控式按键，反应灵敏，操作便捷，故障率低
- BRIGHT I智能操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿
- 具备倒计时预约功能，预约时间范围为0-9999min
- 可编程序序设计：10段100周期程序设定
- 风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗
- 风门电动可调，可根据样品不同或升温速率要求不同调节腔内换风速率
- 双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保无人值守时设备能够安全运行
- 参考标准GB/T 30435-2013

结构特点

- 抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位，搁板采用加强型设计，负载能力提高1.5倍以上
- 采用高品质的保温材料使整机性能体现更优越
- 旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性
- 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果
- 腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁
- 标配1路485接口
- 选配：打印机、在线监控平台、进出风过滤器、GPRS短信报警

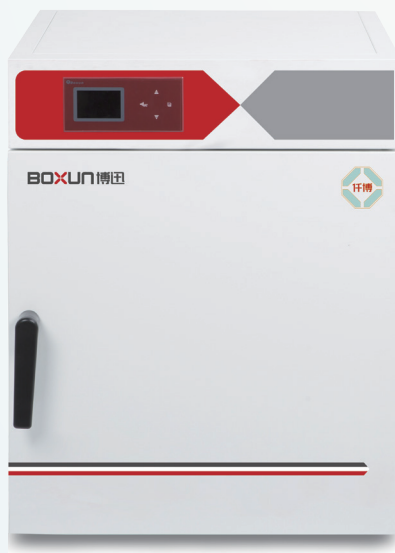

进出风过滤器(选配)

性能参数	型号	BXH-65	BXH-130	BXH-210	BXH-280	BXH-450
容积/功率 电源电压	容积(L)	64	129	210	284	452
	输入功率(W)	1550	2150	2750	2750	3500
	电源电压(V)	AC 220V±10V-50/60Hz				
温度参数	控温范围(°C)	室温+5~300				
	分辨率(°C)	0.1				
	波动度(150°C)(°C)	±0.3	±0.3	±0.5	±0.5	±0.5
	均匀度(150°C)(°C)	±1%(室温+5~105°C); ±2%(105°C~300°C)				
	升温时间(150°C)(min)	17	20	20	20	22
产品类型 时间范围	产品类型	带G的型号为干热灭菌箱				
	定时范围	0-9999min/h				
	预约范围(min)	0-9999				
内胆尺寸	长度(mm)	410	570	630	720	600
	宽度(mm)	350	400	530	530	580
	高度(mm)	450	570	630	745	1300
外形尺寸	长度(mm)	555	715	775	865	774
	宽度(mm)	566	616	746	746	845
	高度(mm)	722	842	902	1019	1704
过滤器/ 载物托架	进/出风过滤器	带G型号标配				
	托架数量(标配/最多)	2/5	2/7	3/7	3/9	4/13
	每层承重(kg)	25				
货运信息	毛重(kg)	60	75	96	118	174
	净重(kg)	42	57	77	97	145
	外包装尺寸(mm)	635x686x762	795x736x882	855x866x942	945x866x1057	854x965x1744



(抽屉式搁板)



(门把手)



(排风口)